

A-dec 500

# ADVANCED AIR

**Wysokoobrotowa doskonałość  
napędzana powietrzem.**

*Jedynie dodana jako opcja  
do nowej konsoly A-dec 500.*

Primea™ Advanced Air® od firmy W&H® to pierwsza na świecie napędzana powietrzem końcówka wysokoobrotowa z regulowaną prędkością wiertła i stałym tempem pracy — nawet przy większym docisku. Dzięki zasięgowi od 60 000 do 320 000 obr./min zyskujesz w każdym momencie optymalną prędkość zastosowania i maksymalną skuteczność leczenia. Ta kompaktowa i lekka końcówka stanowi wyjątkowe połączenie mocy, spójności i kontroli.

“

*Łączy wydajność przycinania i kontrolę  
urządzeń elektrycznych z dotykową  
odpowiedzią powietrza”.*

Michael Van Gordon, DMD PC  
PC St.Helens, Oregon, USA



# JEDNA LEKKA KOŃCÓWKA

## PRZYCINA SZYBCIEJ KORONY I MOSTY

Przycina i modeluje prace ceramiczne i metalowe. Dzięki końcówce Primea Advanced Air możesz ustawić zalecaną prędkość dla określonego wiertła i utrzymywać dokładne, stałe tempo usuwania.

### SZCZEGÓLNE CECHY:


- Jeśli podczas cięcia docisk wiertła wzrasta, dostarczane powietrze jest automatycznie regulowane, utrzymując stałą prędkość wiertła.

## USUWAJ WYPEŁNIENIA BEZPIECZNIE I SKUTECZNIE

Idealny stosunek minimalnego poziomu ciepła do wysokiego tempa opracowywania jest osiągany przy prędkości 160 000 obr./min. Dzięki końcówce Primea Advanced Air usuniesz szybko i bezpiecznie stare wypełnienia, od amalgamatu i kompozytu do dwutlenku cyrkonu.

### SZCZEGÓLNE CECHY:

- 5 kanałów sprazu chłodzi końcówkę wiertła w każdej pozycji stosowania.

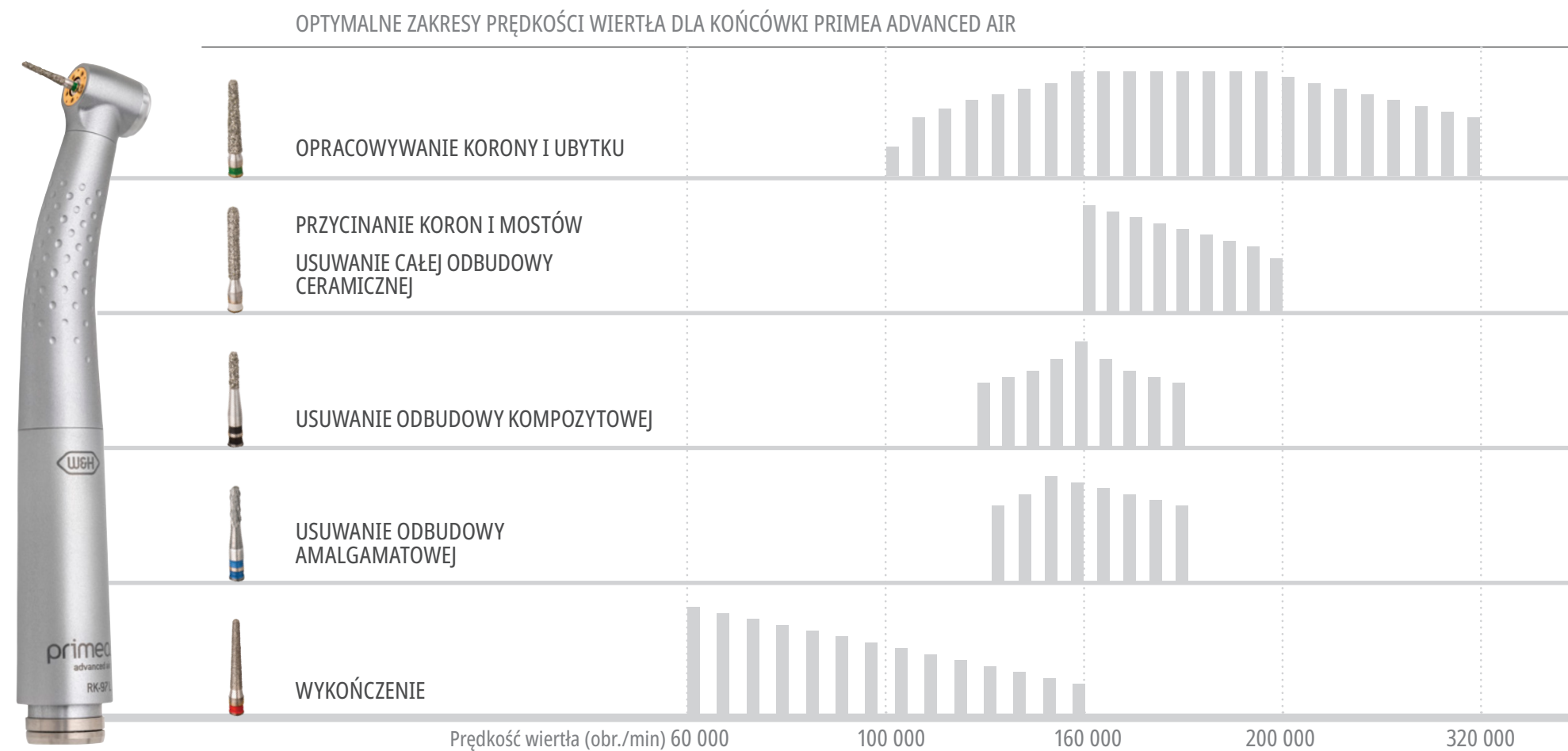

# WYKONUJE WIELE PROCEDUR.

## KONTROLA WYKOŃCZENIA

Przy wyborze trybu Tactile (delikatnej pracy), dzięki końcówce Primea Advanced Air wykonasz tę subtelną procedurę przy stałej prędkości wiertła na niskim poziomie 60 000 obr./min. Profiluj opracowywaną powierzchnię przy minimalnym ryzyku i zakończ brzegi z większym poczuciem kontroli niż w przypadku klasycznej końcówki turbinowej.

### SZCZEGÓLNE CECHY:

- Lekkie i ciche działanie zmniejsza zmęczenie i pozwala mieć rzeczywistą kontrolę nad wykonywanymi czynnościami, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo dla pacjenta.

## ROZPOCZNIJ OPRACOWYWANIE UBYTKÓW I KORON BEZ ŻADNEGO WYSIŁKU

Stać wysoka prędkość wiertła do 320 000 obr./min umożliwia skuteczne, kontrolowane i dokładne wykonywanie zadań wymagających wysokiej prędkości. Możesz bez żadnego wysiłku otworzyć ubytki, bezpiecznie wyprofilować preparowane korony i zapewnić skuteczne leczenie.

### SZCZEGÓLNE CECHY:

- 5x pierścień LED+ oferuje optymalne pole widzenia miejsca zabiegowego i zapewnia wolne od zaciemnionych miejsc oświetlenie szerokopasmowe (jedynie końcówka RK-97L).



### TRYB OBROTOWY

W momencie podłączenia wiertła zapewnia natychmiastowy wysoki obrót. Idealny dla etapu wykończenia, gdy tak ważny jest feedback dotyczący ubytku.



### TRYB TACTILE (DELIKATNEJ PRACY)

Zapewnia łagodniejszy obrót od wolniejszego do wysokiego w momencie podłączenia wiertła. Idealny dla etapów wykończenia, gdy najistotniejsza jest zwrotna odpowiedź dotykowa.

# KTO POWIEDZIAŁ, ŻE DOSKONAŁOŚCI NIE DA SIĘ OSIĄGNAĆ?



A-dec, A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius oraz reliablecreativesolutions są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200 i EasyFlex są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole i ikony znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakikolwiek użycie tych symboli i ikon, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest surowo zabronione.

Advanced Air®, Alegria®, Endea®, Proxeo®, Synea®, i W&H® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria). Primea™ jest również znakiem towarowym firmy W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH (Austria)

© 2019 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. 85.0861.18/BB/1M/04-19/Rev A

Dodaj końcówkę Advanced Air® do nowej konsoli A-dec 500 i poszerz możliwości każdego gabinetu.

**ABY POZNAĆ RÓŻNICĘ, SKONTAKTUJ SIĘ Z LOKALNYM  
DYSTRYBUTOREM PRODUKTÓW FIRMY A-DEC.**

#### Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive | Newberg, Oregon 97132 USA

Telefon: 1 800 547 1883 na obszarze USA i Kanady

Telefon: +1 503 538 7478 spoza USA i Kanady

Faks: +1 503 538 0276

[a-dec.com/500experience](http://a-dec.com/500experience)

#### A-dec Australia

Telefon: 1 800 225 010 na obszarze Australii

Telefon: +61 (0)2 8332 4000 spoza Australii

#### A-dec Chiny

Telefon: 400 600 5434 na obszarze Chin

Telefon: +86 571 89026088 spoza Chin

#### A-dec Wielka Brytania

Telefon: 0 800 233285 na obszarze Wielkiej Brytanii

Telefon: +44 (0) 24 7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

